



# Tubos BD Vacutainer®



## Tubo BD Vacutainer® Fluoreto


Os tubos BD Vacutainer® Fluoreto/EDTA são utilizados para dosagem de glicose e lactato no plasma. Possuem Fluoreto de Sódio como inibidor glicolítico e o anticoagulante EDTA, que preserva a morfologia celular mantendo a qualidade da amostra.

Os tubos BD Vacutainer® Fluoreto/EDTA são validados clinicamente para dosagem de Glicose, Lactato e Hemoglobina Glicada – A1C.

| Código | Descrição              | Tamanho | Volume | Cor |
|--------|------------------------|---------|--------|-----|
| 367587 | Fluoreto de Sódio/EDTA | 13 x 75 | 2      |     |
| 368521 | Fluoreto de Sódio/EDTA | 13 x 75 | 4      |     |

Apresentação: Caixa com 100 unidades. Tamanho = mm e Volume = mL.

### Instruções de uso:

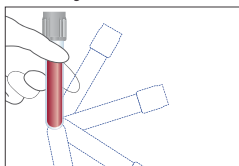

Homogeneizar de 8 a 10 vezes e manter na posição vertical.

| BD Vacutainer® Fluoreto |        |
|-------------------------|--------|
| RCF                     | Tempo  |
| ≤1300 G                 | 10 min |