



BOLETIM TÉCNICO

COBERTURAS ESTÉREIS PARA CATETERES PERIFÉRICOS

As coberturas para Cateteres Periféricos, devem atender a recomendações Nacionais e Internacionais, como:

“Para promover conforto, qualidade e segurança na assistência prestada ao paciente;


Reduzir custos hospitalares, infecciosas e mecânicas aos dispositivos intravasculares.” (INS Brasil, 2013)

“O propósito da cobertura é: 1) proteger o sítio de punção e minimizar a possibilidade de infecção por meio da interface entre a superfície do cateter e a pele 2) fixar o dispositivo no local e prevenir a movimentação do dispositivo com dano ao vaso” (Anvisa, Setembro 2010)

Produto: Tegaderm 1610

Características Técnicas:

Fixador estéril para fixação de cateter, composto por película transparente de poliuretano semi-permeável, com adesivo hipoalergênico, que garante barreira bacteriana e viral, além de impermeabilidade à líquidos ou fluídos corporais. Possui fenda e reforço nas bordas inferiores, de não tecido macio para proporcionar estabilização em torno dos cateteres e de outros dispositivos sobre a pele. Contém 02 tiras adesivas extras para promover a estabilização do cateter, estéreis, compostas por não tecido de poliéster, macio, altamente conformável e com adesividade controlada para minimizar riscos de lesões para pele sensível. Sistema de aplicação com moldura, facilitando a aplicação que reduz o número de perda do fixador. Produto livre de látex. Medida 5 cm x 5,7cm.

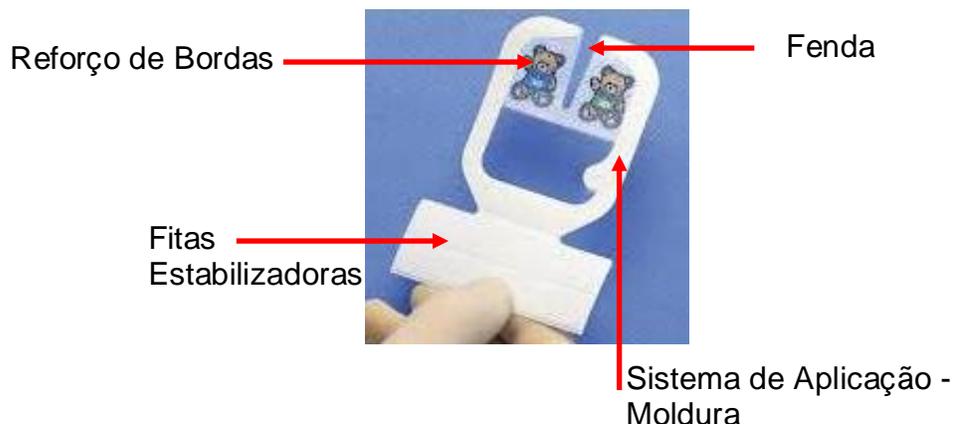

Indicações de Uso:

Fixação e estabilização de Cateteres Periféricos

Tempo de Permanência:

“Todas as coberturas devem ser substituídas em intervalos regulares e imediatamente quando sua integridade estiver comprometida.” (INS Brasil, 2013)

“Quando apresentar-se suja, úmida ou sua integridade estiver comprometida” (INS Brasil, 2013)

Benefícios:

- Estéril
- Não Oclusivo.
- Hipoalergênico
- Praticidade de Uso
- Confortável ao paciente
- Resistente a água
- Borda inferior reforçada
- Sistema de Aplicação, que facilita a utilização do curativo

Precauções de uso:

- Não aplicar diretamente sobre o sítio de inserção se houver sinais de infecção no local.
- Não aplicar substâncias químicas sobre a pele com o objetivo de aumentar a adesividade do produto
- Não aplicar sobre sangramentos. A hemostasia deve ser alcançada antes da aplicação do curativo.
- Não aplicar sob tensão.

Estocagem

Os curativos são fornecidos estéreis em embalagens individuais e acondicionados em caixas. A esterilidade do curativo é garantida a menos que sua embalagem individual sofra danos, ou seja, aberta. Estocar em temperatura ambiente (15° - 30° C). Evitar calor e umidade excessivos.

Validade

O período de validade está impresso em cada embalagem; 20 meses a partir da data da Esterilização

Apresentação Comercial:

Tamanho: 5 cm x 5,7 cm

Embalagem: caixa com 100 curativos

Registro ANVISA: 80284930240

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA - ANVISA, SETEMBRO 2010
- DIRETRIZES PRÁTICAS PARA TERAPIA INFUSIONAL – INS BRASIL , EDIÇÃO 2013

3M DO BRASIL

MEDICAL DIVISION C3SD (CRITICAL & CHONIC CARE SOLUTIONS DIVISION)

e-mail: helplinehospitalar@mmm.com

Help Line Hospitalar: 0800-0556903