


# FICHA TÉCNICA



## SONDA URETERAL, BCI MEDICAL


### CARACTERÍSTICAS

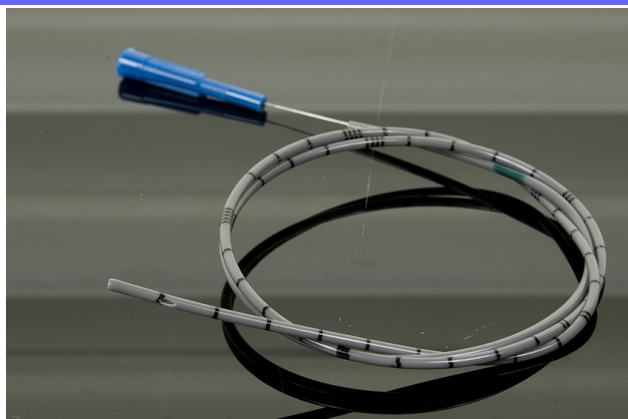

- Cateter ureteral, com extremidade flexível, mandril, radiopaco, graduada de cm em cm aproximadamente 70 cm.
- Mandril de aço inoxidável
- Adaptador Luer-Lock de PVC  
Acondicionado em tubo de PVC, revestido em papel grau cirúrgico, esterilizado por óxido de etileno.



Ponta fechada com 01 furo lateral

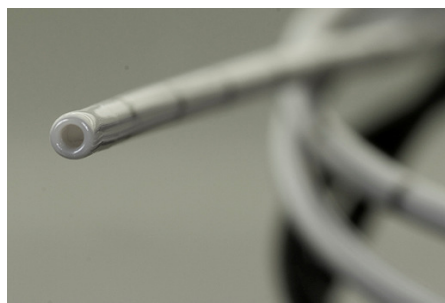

Ponta Aberta

### COMPOSIÇÃO

Cateter ureteral: Poliuretano  
Mandril (fio guia): Aço inoxidável  
Adaptador Luer-Lock: PVC  
Isento de látex, isento de ftalato (DEPH).

### MEDIDAS E CALIBRES

REFERÊNCIA	MODELO	TAMANHO
94620304	Sonda Ureteral com ponta cilíndrica 1 furo	CH 3
94620404	Sonda Ureteral com ponta cilíndrica 1 furo	CH 4
94620504	Sonda Ureteral com ponta cilíndrica 1 furo	CH 5
94620604	Sonda Ureteral com ponta cilíndrica 1 furo	CH 6
94620704	Sonda Ureteral com ponta cilíndrica 1 furo	CH 7
94620804	Sonda Ureteral com ponta cilíndrica 1 furo	CH 8
94720304	Sonda Ureteral cinza ponta aberta	CH 3
94720404	Sonda Ureteral cinza ponta aberta	CH 4
94720504	Sonda Ureteral cinza ponta aberta	CH 5
94720604	Sonda Ureteral cinza ponta aberta	CH 6



## SONDA URETERAL, BCI MEDICAL

### INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

Trata-se de cateter para pielografia (também conhecida como urografia retrógrada) utilizado para drenagem de urina na realização do exame. É um exame radiológico que, por meio de imagens, analisa o sistema urinário.

A realização deste exame é comum em casos de disfunção renal ou obstrução das vias ureterais.

Para a realização do exame, o cateter ureteral para pielografia é introduzido em um ou ambos os ureteres e cada ponta desse elemento deve ser alinhada com a pelve renal do paciente.

### ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTO SOBRE O USO DO PRODUTO

Produto esterilizado por Óxido de Etileno. A embalagem deve ser protegida contra os riscos de violação. Manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Destruir após o uso.

Este procedimento só deve ser efetuado por médicos especialistas que devem seguir os procedimentos técnicos padrões corretos, minimizando riscos de uma utilização incorreta.

Recomenda-se na utilização do produto a escolha pelo médico da apresentação mais adequada e indicada em cada caso em particular, conforme a necessidade de cada paciente.

A manipulação errada pode comprometer seriamente o cateter. Devem ser evitadas as angulações e dobras na sonda.

Caso haja incrustações a sonda deve ser removida, porque pode ser prejudicial à drenagem, devendo ser substituída. A colocação ou retirada da sonda nunca deve ser forçada. Havendo resistência, deve ser removida ou introduzida cuidadosamente.

Todos estes procedimentos devem ser executados baseados nas condições individuais de cada paciente.

### INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

Esse procedimento deverá ser executado em condições estéreis controladas.

A sonda vem pronta para sua utilização, desde que sua embalagem esteja intacta, mantendo a integridade da esterilização.

Deve ser retirada da sua embalagem no momento mais próximo possível de sua utilização, iniciando sua introdução após promover seu total estiramento, de forma cuidadosa, de acordo com os procedimentos adequados.

### ESTERILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

O cateter ureteral é fornecido estéril sendo sua esterilização por Óxido de Etileno. A esterilidade é garantida desde que a embalagem não seja danificada ou violada. Não voltar a esterilizar o produto e não utilizar após a data de validade da esterilização. Material de uso único, não pode ser reprocessado.

# FICHA TÉCNICA



## SONDA URETERAL, BCI MEDICAL

Condições de armazenamento: armazenar, transportar e manipular em local limpo, seco e ventilado.

Prazo de validade garantido, por 05 anos a partir da data de esterilização, desde que as condições de armazenamento sejam respeitadas e a embalagem não seja danificada ou violada.

### FABRICANTE

**Fabricante:**

Electroplast S/A  
Servando Gomez, n° 2450  
Montevideo - Uruguai

**Importador e Distribuidor:**

Badeia Comércio e Importação Ltda  
Rua do Hipódromo, 1465/1473 – Fone: 11-2292.0474 / Fax.: 11-2292.2053  
Cep.: 03162-020 – São Paulo - SP  
e-mail: badeia@badeia.com.br  
site : www.badeia.com.br  
Responsável técnico: Celso Correa – CRBIO: 100741

**Registro ANVISA:** 10297020025