




Compromisso com a vida

MICRO-HART® 150 ml

Aplicação do Produto :

Equipo com Câmara graduada até 150 ml para administração exata de pequenos volumes.

Desenho do produto :

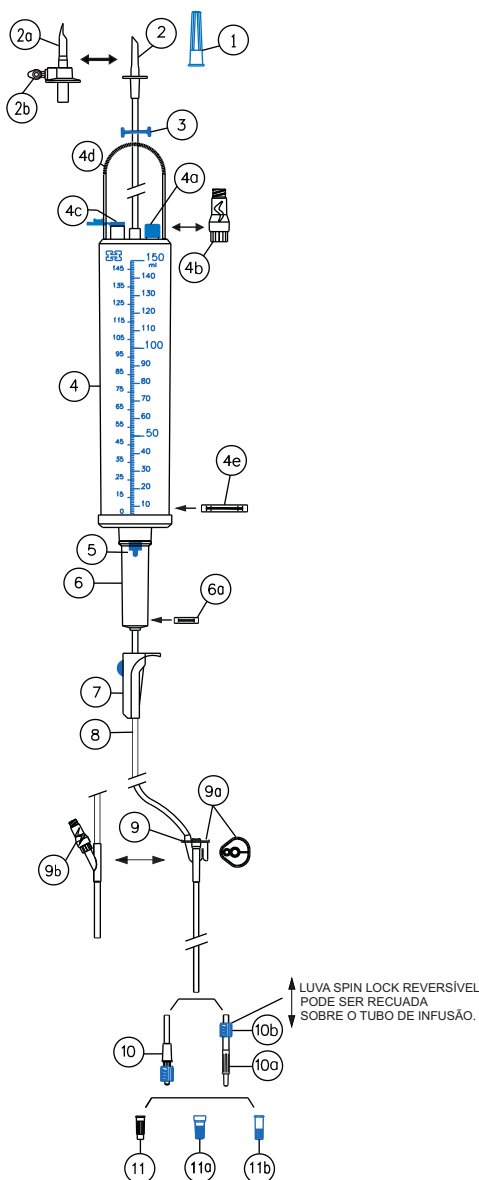

Saúde



FAMÍLIA: EQUIPO ENDOVENOSO CÂMARA GRADUADA
REG. ANVISA: 10104480047
Equipo com Bureta ISO 8536-5-BS-150-G

Ficha Técnica :

Composição do Produto

- 1 **Protetor do Penetrador** adequado para garantir a esterilidade do produto.
- 2 **Penetrador anatômico** para adaptação em ampolas, bolsas plásticas e frascos.
Variações:
 - 2a **Penetrador anatômico com entrada de ar** com 2b filtro hidrófugo/bacteriológico e tampa protetora.
- 3 **Corta-Fluxo** de fácil manuseio.
- 4 **Câmara Graduada de 0 a 150 ml** Cristal com precisão de 1 ml e leitura c/ destaque de 5 em 5 ml. Em sua parte superior contém injetor 4a com borracha cicatrizante ou injetor válvulado 4b sem a utilização de agulha e filtro de entrada de ar 4c hidrófugo, bacteriológico e válvula de segurança 4e para fechamento do líquido ao término da infusão, não permitindo a passagem de ar para a parte inferior do equipo. Alça plástica 4d para sustentação da câmara.
- 5 **Microgotejador** de 60 gotas/ml.
- 6 **Câmara Flexível** Cristal de material atóxico grau médico.
Complemento:
 - 6a **Filtro de partículas de 15 micra.**
- 7 **Pinça Rolete** com corta-fluxo e descanso para tubo de fácil manuseio com estabilidade na taxa de gotejamento com queda menor de 10%.
- 8 **Tubo Flexível Cristal** atóxico grau médico com diâmetro uniforme.
- 9 **Injetor Lateral em "Y"** com aba de proteção 9a que permite a introdução de agulhas em posição adequada sem tocar no corpo do injetor, eliminando a possibilidade de liberação de fragmentos e acidentes com agulha.
- 9b **Injetor Válvulado** sem a utilização de agulha.
- 10 **Conector Luer Lock Macho Rotativo** em material transparente p/ conexão em cones fêmeas padrão 6%, conf. NBR ISO 594 - 1 e 2.
Variações:
 - 10a **Conector Luer Tubo Macho** em material cristal com cone de 6% para permitir uma desconexão suave dos cones fêmeas padrão 6% dos dispositivos de infusão conf. NBR ISO 594 - 1 e 2.
Complemento:
 - 10b **Luva Spin Lock Reversível** em material transparente azul p/ conexão em cones fêmeas padrão 6%.
- 11 **Protetor do Conector Luer Lock** adequado para garantir a esterilidade do produto.
Variação:
 - 11a **Protetor do Conector** adequado para garantir a esterilidade do produto.
 - 11b **Protetor com Filtro Eliminator de Ar** adequado para retirar todo ar contido no interior do tubo de infusão.

Tabela de primer:

Equipo	Comprimento do Tubo
Micro-Hart 150 ml	150 cm
	10,75 ml

Embalagem Norma: NBR 14990-7

Interna - Tipo "Blister" com papel grau cirúrgico com selagem adequada e abertura suave e filme flexível cristal atóxico grau médico.

Externa - Caixa de papelão reforçada, com rótulo e instruções de uso conforme RDC n.º 185, Anexo III.B de 22/10/2001

- **Esterilizado a Óxido de Etileno**

- **Validade de 3 anos**, desde que a embalagem do produto esteja intacta.