

LL- EQUIPO ENTERAL p/ BOMBA DE INFUSÃO

Equipo com entrada de ar para nutrição enteral com tubo de PVC Isento de DEHP, BPA e Látex, compatível com a Bomba modelo BeneFusion VP3 - MINDRAY, com conector escalonado não luer. Volume de armazenamento a 40°C do equipo de 18,82 mL.

Composição do produto:

- Equipo com padrão da Norma NBR ISO 8536-8
- Gotejador Air (1) com dimensional ISO – NBR
- Filtro de entrada de ar com filtro de 0,2 micra
- Pinça Rolete (2) de controle de fluxo
- Tubo de PVC Lilás (3) isento de DEHP de 230 cm
- Conector escalonado não luer (4).
- Protetor do conector (5) com alça.

Indicação

Indicado para administração de soluções Nutrição Enteral com controle de bomba infusora compatível com o modelo VP3, com precisão de infusão de $\pm 5\%$ na vazão programada.

Registro ANVISA nº 80317519009

Equipo de Infusão por Bomba NBR ISO 8536-8-IS-P

Normas aplicadas aos produtos:

- ABNT NBR ISO 80369-3- Especifica as dimensões e requisitos para o design e desempenho funcional de conectores de pequeno diâmetro destinados a ser usados para conexões Enterais em dispositivos médicos e acessórios
- ABNT NBR ISO 11607 - Especifica os requisitos e métodos de ensaio dos materiais, sistemas de barreira estéril pré-formados, sistemas de barreira estéril e sistemas de embalagem que visam manter a esterilidade dos produtos para saúde até o momento da utilização.
- NBR IEC 60601-2-24 - Equipamento eletromédico – Parte 2: Prescrições particulares para segurança de bombas e controladores de infusão.

Embalagem Primária e Secundária

Primária - Tipo "Blister" com papel grau cirúrgico 60g/m² com abertura sem liberação de partículas e fibras e filme flexível cristal, atóxico grau médico.

Secundária - Caixa de papelão reforçada, com rótulo e instruções de uso.

ABNT NBR 14990-7 - Versão Corrigida - Sistemas e materiais de embalagem para esterilização de produtos para saúde. Parte 7: Envelope e tubular para esterilização por óxido de etileno.

Esterilizado a Óxido de Etileno


- Validade de 3 anos, desde que a embalagem do produto esteja intacta.

Informações Adicionais



- Equipo isento de DHEP, BPA e Látex.

3 - Apresenta tubo de PVC na cor lilás e conector escalonado que diferencia e garante a segurança da infusão das dietas enterais, sem conexão as vias parenterais

3 - Não colocar o tubo de PVC do equipo dobrado, amassado ou torto, deverá ficar reto através do encaixe superior e inferior da seção de bombeamento (seção de dedilhamento), guias de tubo, detectores (ar na linha, oclusão) e o grampo de fluxo livre.

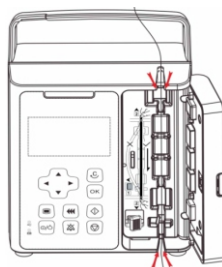

4 - Conexão Atual com conector escalonado não Luer para sonda enterais sem uso da norma ISO 80369-3.

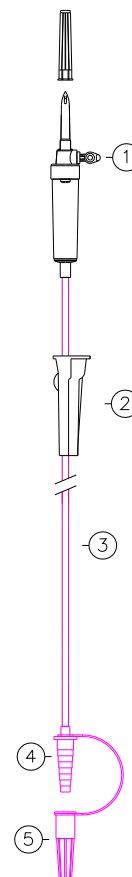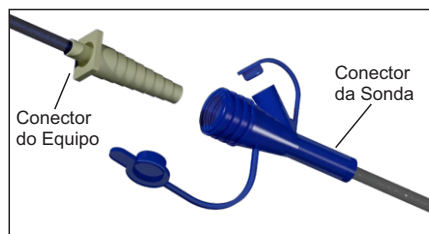

Variações disponíveis

Código	Descrição do Modelo	Quant. (Cx)	Primer (mL)
110.113	LL-Equipo Enteral Bomba Infusora - VP3	100	18,82