

Comprinet® Pro

Meia antiembólica para prevenção da Trombose Venosa Profunda (TVP)

Descrição:


Meia de compressão antiembólica para prevenção da trombose venosa profunda em pacientes, no intra operatório e pós cirúrgicos ou pacientes que necessitem de períodos prolongados de imobilização. O gradiente de pressão continuamente decrescente de distal para proximal aumentando o fluxo sanguíneo, e reduzindo a estase venosa.

Característica:

Confeccionada em tricô circular, o que torna o produto extensível nos dois sentidos, adapta-se a diversos tamanhos e formatos anatômicos. Apresenta abertura circular na região dorsal dos pés, para a inspeção e monitoramento da coloração da perfusão do paciente. Borda elástica de fixação (punho) em neoprene, que reduz o risco de reações alérgicas e evita que a meia escorregue ou enrugue.

Decrescente gradiente de pressão:

Comprinet pro aplica um gradiente de pressão continuamente decrescente de distal para proximal

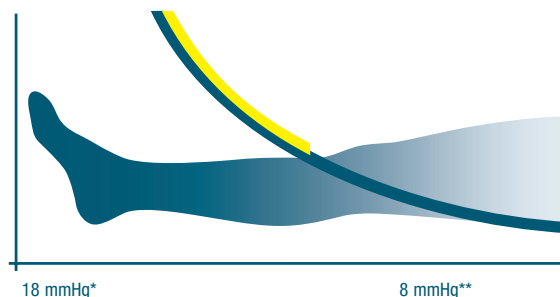

Pé/Tornozelo – 18mmHg
Panturrilha – 14mmHg
Joelho – Região poplíteia – 8mmHg
Coxa Total – 8mmHg.

Composição:

Fabricada com material isento de látex, transpirável e suave à pele, é composta de 77% poliamida, 19% elastano e 4% neoprene no modelo “meia coxa” (ou “sete oitavos”) e; 80% poliamida e 20% elastano no modelo “panturrilha” (ou “três quartos”).

Cuidado profissional com o máximo conforto



Indicação:

Meia de compressão antiembólica para prevenção da trombose venosa profunda em pacientes no intra operatório, pós cirúrgicos ou pacientes que necessitem de períodos prolongados de imobilização abaixo:



Comprinet® Pro

Meia antiembólica para prevenção da Trombose Venosa Profunda (TVP)

Apresentações:

Comprinet® Pro				
BNR	SIMPRO	BRASÍNDICE	TAMANHO	EMBALAGEM
77026-00	0260094	77026-00	Panturrilha P	Envelope 1 par (não estéril)
46335-00	0260079	46335-00	Meia coxa regular P	Envelope 1 par (não estéril)
46336-00	0260081	46336-00	Meia coxa longo P	Envelope 1 par (não estéril)
77027-00	0260095	77027-00	Panturrilha M	Envelope 1 par (não estéril)
46337-00	0260083	46337-00	Meia coxa regular M	Envelope 1 par (não estéril)
46338-00	0260085	46338-00	Meia coxa longo M	Envelope 1 par (não estéril)
77028-00	0260097	77028-00	Panturrilha G	Envelope 1 par (não estéril)
46388-00	0260088	46388-00	Meia coxa regular G	Envelope 1 par (não estéril)
46389-00	0260090	46389-00	Meia coxa longo G	Envelope 1 par (não estéril)
77124-00	0260101	77124-00	Panturrilha XG	Envelope 1 par (não estéril)
77125-00	0260091	77125-00	Meia coxa regular XG	Envelope 1 par (não estéril)
77128-00	0260092	77128-00	Meia coxa longo XG	Envelope 1 par (não estéril)

Identificação do tamanho correto da meia:

Comprinet Pro utiliza dois sistemas de codificação

Cores e números

Códigos de barras na embalagem

Tamanho	Pequeno (Small)		Médio (Medium)		Grande (Large)	
Apresentação	normal	long	normal	long	normal	long
Código embalagem						
Código cor						

Fácil seleção e classificação através da codificação:

Validade: indeterminado

Esterilização: Não estéril

Marca: BSN Medical

Fabricação: BSN medical Inc – EUA

Registro Anvisa: 10224000097

Validade do registro: Não aplicável

NCM: 6115.10.12

Responsável Técnico: Juliana K. Schuh - CRF/SP 65.617