


Infusor 02 Vias Neo Luer Slip com Clamp

Indicado para uso em terapias de administração de soluções parenterais simultâneas compatíveis em neonatologia e pediatria.

Advertências:

- Higienizar as mãos antes e após manipular o produto.
- Usar técnica asséptica para abertura da embalagem e manipulação do produto.
- Produto de uso único, proibido reprocessar, após o uso descartar em local apropriado.
- Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada.

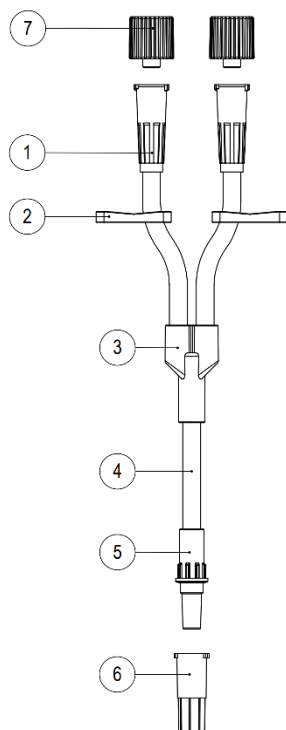

Características:

- Totalmente transparente.
- Vazão de fluxo: 125ml/min.
- Volume de Priming: 0,22ml.
- Pressão em linha: 400psi.
- Livre de BPA, DEHP, Látex e Metais.
- Compatível com Álcool, Clorexidina, Hemoderivados e Lipídios.
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico e Filme Termoplástico.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Validade 60 meses.

Legenda:

- 1 – Conector Luer Lock Fêmea:** Proporciona encaixes precisos e seguros entre o Sistema de Infusão e outros produtos providos de conectores com padrão luer macho (Ex.: Equipos, Seringas, Extensores...).
- 2 – Clamp Corta-Fluxo:** Permite interromper e reiniciar imediatamente o fluxo de infusão da solução sempre que necessário.
- 3 – Adaptador 02 Vias:** Promove a união das múltiplas entradas do produto, adaptando-as à saída única direcionada ao Acesso Venoso.
- 4 – Tubo flexível e transparente:** Possibilita avaliar e monitorar visualmente a administração da solução e estabilizar perfeitamente todo o Sistema de Infusão preservando assim a integridade do Acesso Venoso.
- 5 – Conector Luer Slip Macho:** Proporciona encaixe preciso e seguro entre o Infusor e o Acesso Venoso.
- 6 – Protetor do Conector Luer Slip Macho:** Mantém íntegro e estéril o Conector Luer Slip Macho até o momento de uso do produto.
- 7 – Protetor do Conector Luer Lock Fêmea:** Mantém íntegro e estéril o Conector Luer Lock Fêmea até o momento de uso do produto.

Anvisa: 81516730004

Modelo do produto: 060004

Farm. Responsável: Cristiane S. dos S. Mattos – CRF-BA-4139

INFUSÃO HOSPITALAR

Av.:Deputado Luís Eduardo Magalhães,Km 523,S/Nº - Bairro Subaé

Feira de Santana - BA - Brasil - CEP 44079-002

Tel.:+55 75 3626-7521 - E-mail:infusao@infusaohospitalar.com.br