


Infusor 02 Vias Neo Spin Lock com Protetor com Filtro com Tampas Adicionais Com Clamp

Indicado para uso em terapias de administração de soluções parenterais simultâneas compatíveis em neonatologia e pediatria.

Advertências:

- Higienizar as mãos antes e após manipular o produto.
- Usar técnica asséptica para abertura da embalagem e manipulação do produto.
- Produto de uso único, proibido reprocessar, após o uso descartar em local apropriado.
- Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada.

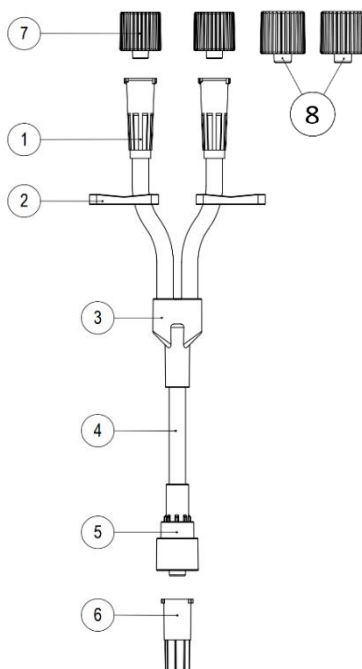

Características:

- Totalmente transparente.
- Vazão de fluxo: 125ml/min.
- Volume de Priming: 0,22ml.
- Pressão em Linha: 400psi.
- Livre de BPA, DEHP, Látex e Metais.
- Compatível com Álcool, Clorexidina, Hemoderivados e Lipídios.
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico e Filme Termoplástico.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Validade 60 meses.

Legenda:

- 1 – Conector Luer Lock Fêmea:** Proporciona encaixes precisos e seguros entre o Sistema de Infusão e outros produtos providos de conectores com padrão luer macho (Ex.: Equipos, Seringas, Extensores...).
- 2 – Clamp Corta-Fluxo:** Permite interromper e reiniciar imediatamente o fluxo de infusão da solução sempre que necessário.
- 3 – Adaptador 02 Vias:** Promove a união das múltiplas entradas do produto, adaptando-as à saída única direcionada ao Acesso Venoso.
- 4 – Tubo flexível e transparente:** Possibilita avaliar e monitorar visualmente a administração da solução e estabilizar perfeitamente todo o Sistema de Infusão preservando assim a integridade do Acesso Venoso.
- 5 – Conector Spin Lock Macho:** Possui mecanismo com rosca rotativa padrão luer lock. Proporciona encaixe preciso e seguro, eliminando completamente o risco de desconexões acidentais entre o Sistema de Infusão e o Acesso Venoso.
- 6 – Protetor do Conector Spin Lock Macho com Filtro:** Mantém íntegro e estéril o Conector Spin Lock Macho até o momento de uso do produto. Provido de filtro de ar com membrana hidrófoba, permite a eliminação do ar ao mesmo tempo que retém o fluido no interior do produto.
- 7 – Protetor do Conector Luer Lock Fêmea:** Mantém íntegro e estéril o Conector Luer Lock Fêmea até o momento de uso do produto.
- 8 – Protetores do Conector Luer Lock Fêmea Adicionais:** Utilizáveis para proteger o(s) Conector(es) Luer Lock Fêmea quando desconexões protocolares entre os Sistemas de Infusão sejam necessárias.

Anvisa: 81516730004

Modelo do produto: 060063

Farm. Responsável: Cristiane S. dos S. Mattos – CRF-BA-4139