


INDICADO PARA IRRIGAÇÃO DE CAMPOS CIRÚRGICOS, LAVAGEM DE CAVIDADES, LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE FERIDAS.

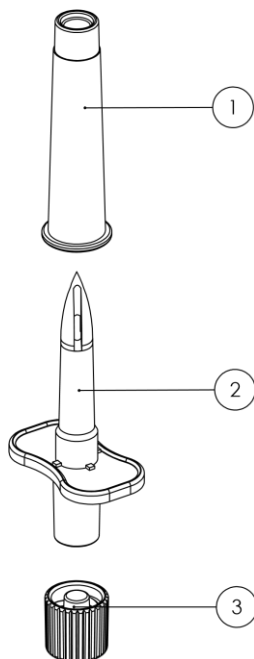

LEGENDA:

- 1. PROTETOR DA PONTA PERFURANTE:** Mantém íntegra e estéril a Ponta Perfurante até o momento de uso do produto.
- 2. PONTA PERFURANTE:** Fabricada de acordo com a norma ABNT NBR/ISO, proporciona encaixes fáceis, precisos e seguros junto à Frascos/Ampolas de soluções.
- 3. TAMPA PROTETORA PADRÃO CONE LUER:** Veda e protege a saída do sistema Frasco/Dispositivo, mantendo a integridade do conteúdo do Frasco após a conexão ao Dispositivo.

CARACTERÍSTICAS:

- Livre de BPA, DEHP, Látex e Metais.
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico e Filme Termoplástico.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Validade 60 meses

ADVERTÊNCIAS:

- Higienizar as mãos antes e após manipular o produto;
- Usar técnica asséptica para abertura da embalagem e manipulação do produto;
- Produto de uso único, proibido reprocessar, após o uso descartar em local apropriado;
- Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada.

CÓDIGO	MODELO COMERCIAL
060260	DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE FLUIDOS ESTÉREIS

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Cristiane S. dos S. Mattos – CRF-BA-4139

ANVISA: 81516730003

REFERÊNCIA NORMATIVA:

- ABNT NBR ISO 594 - 1:2003 - Montagem cônica com conicidade de 6% (Luer) para seringas, agulhas e outros equipamentos médicos - Parte 1: Requisitos gerais.
- ABNT NBR ISO 594 - 2:2003 - Montagem cônica com conicidade de 6% (Luer) para seringas, agulhas e outros equipamentos médicos - Parte 2: Montagem fixa.
- ABNT NBR ISO 80369 - 7:2022 - Conectores de pequeno diâmetro para líquidos e gases para aplicação em saúde - Parte 7: Conectores para aplicações intravasculares ou hipodérmicas.
- ABNT NBR ISO 8536 - 4:2011 - Equipamento de infusão para uso médico - Parte 4: Equipos de infusão para uso único, alimentação por gravidade.